


«ЕНИСЕЙ» ИПБ-170



ПОДЪЁМНИК ДЛЯ БАССЕЙНА

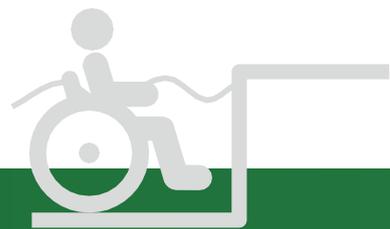

- СДЕЛАНО В РОССИИ
- БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
- ЛЕГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ПРОСТОТА И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
- АВТОНОМНОСТЬ
- ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА

«ЕНИСЕЙ» ИПБ-170




ОПИСАНИЕ

Стационарный инвалидный подъемник для бассейна «ЕНИСЕЙ» ИПБ-170 служит для перемещения людей с ограниченными физическими возможностями в бассейн и обратно. Конструкция разработана в соответствии с возможностями инвалидов, проста и надежна в применении.

Подъемник ИПБ 170 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Для дополнительной защиты от коррозии подъемник покрывается порошковой эмалью, колеруемой в любой цвет по RAL.

*Электропривод обеспечивает плавный ход штока, а также имеет функцию механического и электрического аварийного опускания. Устройство не требует специальных навыков установки и обслуживания. Подъемник «ЕНИСЕЙ» ИПБ-170 - это идеальное сочетание качества и простоты по выгодной цене. Стоимость подъемника существенно ниже аналогичных моделей иностранного производства.

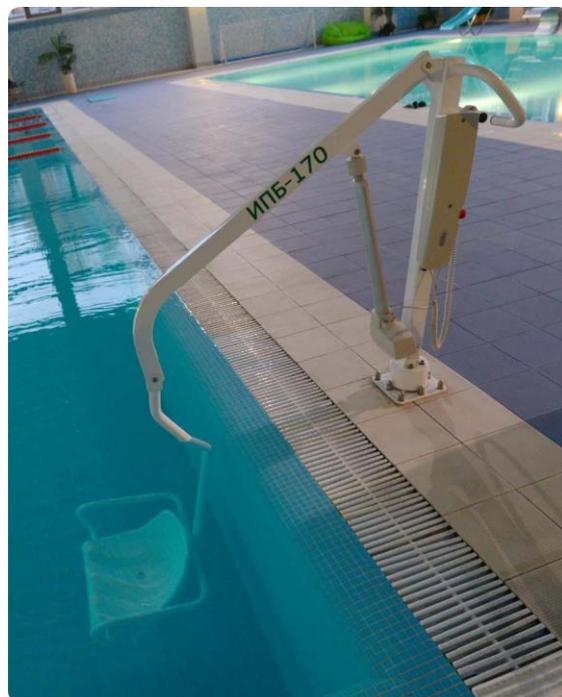

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полное наименование:

Подъемник стационарный для инвалидов в бассейн типа «ИПБ 170»

Номинальная грузоподъемность:	140 кг (опционально до 175 кг)
Вместимость:	один человек
Тип привода:	электрический или гидравлический
Скорость:	максимально 0,04 м/сек (Э)
Электропитание:	24В, 50 Гц (Э)
Схема управления:	24 В, микропроцессорная (Э)
Кнопки управления:	постоянного нажатия (Э)
Максимальная глубина опускания:	до 1,1 метра
Соответствие нормам:	ТУ 9451-007-29027391-2002
Управление:	кнопки постоянного нажатия (Э)
Устройства безопасности:	аварийная гайка* (Э)
Класс защиты:	IPX4 (Э)
Материал:	нержавеющая сталь покрытая порошковой эмалью

ОПЦИИ И МОДИФИКАЦИИ

ИПБ-170Э - подъемник с электроприводом
ИПБ-170ЭП - подъемник с электроприводом, выполненный из полированной нержавеющей стали
ИПБ-170Г - подъемник с гидроприводом

- Механическое и электрическое аварийное опускание*;
- Конструкция из нержавеющей стали **;
- Цвет по выбору потребителя.

*Модели ИПБ-170 Э или ИПБ-170 ЭП
**Модели ИПБ-170 ГП или ИПБ-170 ЭП

